

Die neue Referenz für die praktische Arbeitsmedizin Sehtestgerät TITMUS V4



- Kontrastsehen nach FEV
- Speziell für Untersuchungen nach G 25 und G 37
- Stufenlose Höhenverstellung zur Anpassung an Körpergröße
- Einfache und komfortable Steuerung mit Fernbedienung
- Neue LED-Beleuchtung mit 10.000 Stunden Lebensdauer
- Inklusive speziellem Rollenkoffer
- Integriertes Screening-Perimeter für horizontales Gesichtsfeld
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Preiswert – schnell – einfach – robust Sehtests für die Arbeitsmedizin mit TITMUS V4

Mit voller Leistung für G 25, G 37

Das TITMUS V4 wurde für arbeitsmedizinische Untersuchungen nach G 25 und G 37 gemäß DIN 58 220 entwickelt. Zusätzlich bietet das Gerät Kontrastsehen nach FEV, Anlage 6 für straßenverkehrsbezogene Sehschärfetests.

Kompakt und mobil

Das Gerät ist kompakt und wiegt nur 5,9 kg. Damit lässt es sich einfach in dem dazugehörigen Rollenkoffer verstauen und ist ideal für den mobilen Einsatz.

Ergonomisch

Durch einfache Höhenverstellung kann das ergonomisch geformte Gerät an die Körpergröße des Probanden angepasst werden. Die weiche Kopfauflage unterstützt eine korrekte Kopfposition und ist einfach zu reinigen.

Elektronischer Sensor


Ein elektronischer Sensor erkennt die richtige Kopfposition. Der Patient kann die Testdias nicht sehen, wenn der Kopf nicht in der richtigen Position ist.

Schnelle Sehtests

Mit dem V4 können die wesentlichen Sehfunktionen im Nah- und Fernbereich in weniger als 5 Minuten getestet werden.

Einfache, komfortable Bedienung

Die unterschiedlichen Testfunktionen werden per Knopfdruck gewählt. Die digitale Fernbedienung ermöglicht dabei eine komfortable Arbeitsposition.

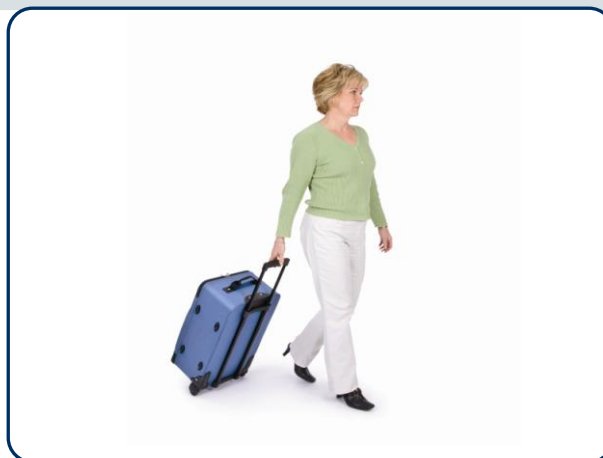

Mit praktischem Rollenkoffer

Technische Daten

Tests:

- Sehschärfe, monokular/binokular (Landoltringe nach DIN 58220)
- Kontrastsehen
- Stereoskopische Tiefenwahrnehmung
- Farbwahrnehmung (Farbtest nach Ishihara)
- Phorie, vertikal/horizontal
- Horizontales Gesichtsfeld durch integriertes Perimeter

Stromversorgung Netz 100 ... 240 V~ , 50/60 Hz, ca. 250 VA

Maße und Gewichte B x H x T: 28 x 19 x 43 cm / 5,9 kg

Sicherheitsnormen EN 60601-1, Gerät entspricht der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse I



Standardzubehör:

8 Testdias
Netzkabel
Staubschutzhülle
Bedienungsanleitung
10 Linsenreinigungstücher
Päckchen mit 3 Antibeschlag-Tüchern
1 Linse 57 cm
1 Fernbedienung
1 Auswerteblock
1 Auswerteblock Kontrastsehen (Kopiervorlage)

Sonderzubehör/Verbrauchsmaterial:

Auswerteblock Bestell-Nr. 861 005
Speziallinsen für G 37: arbeitsplatzbezogener Sehabstand, (50, 67, 80, 100 cm Entfernung)

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.



MAICO Diagnostic GmbH
Salzufer 13/14
10587 Berlin
Tel.: 030 70 71 46-20
Fax: 030 70 71 46-99
e-mail: vertrieb@maico.biz
Internet: www.maico.biz